



Étude TRINITY | Réduction constante de la régurgitation tricuspide (RT) pour toutes les tailles d’anneau

Le système TTVR LuX-Valve Plus a démontré une réduction durable de la RT à six mois : 94,4 % des patients présentaient alors une régurgitation de grade modéré ou inférieur. Une amélioration comparable a été observée chez les patients présentant un anneau de grande taille.

Amélioration de la RT

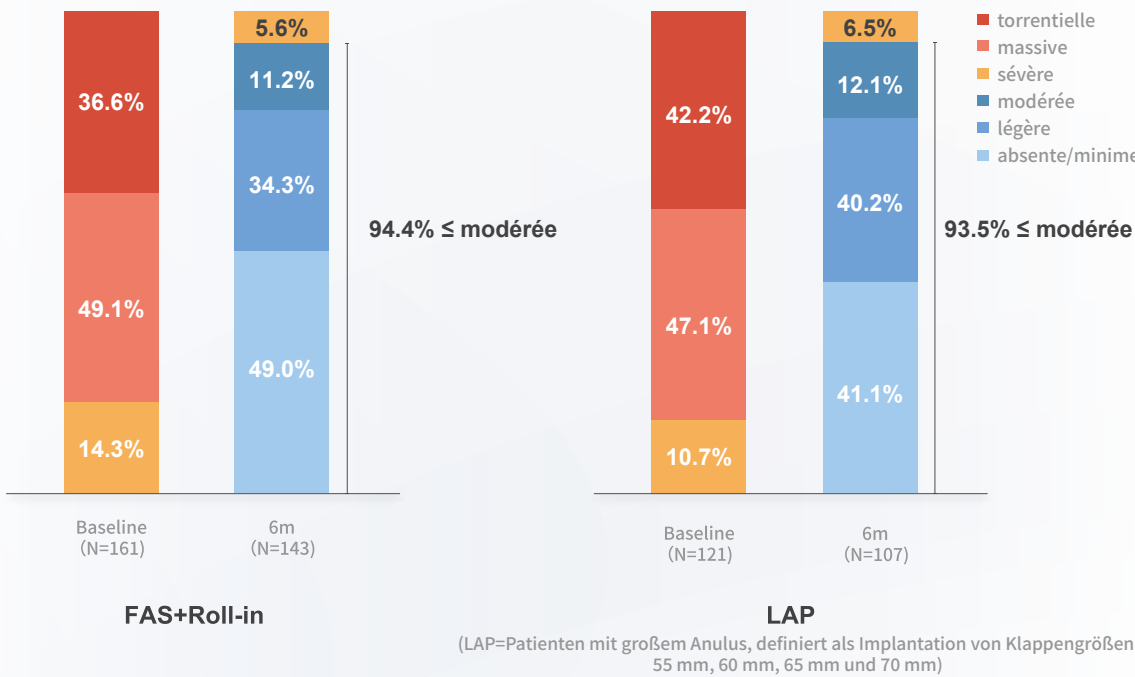

Informations relatives au dispositif

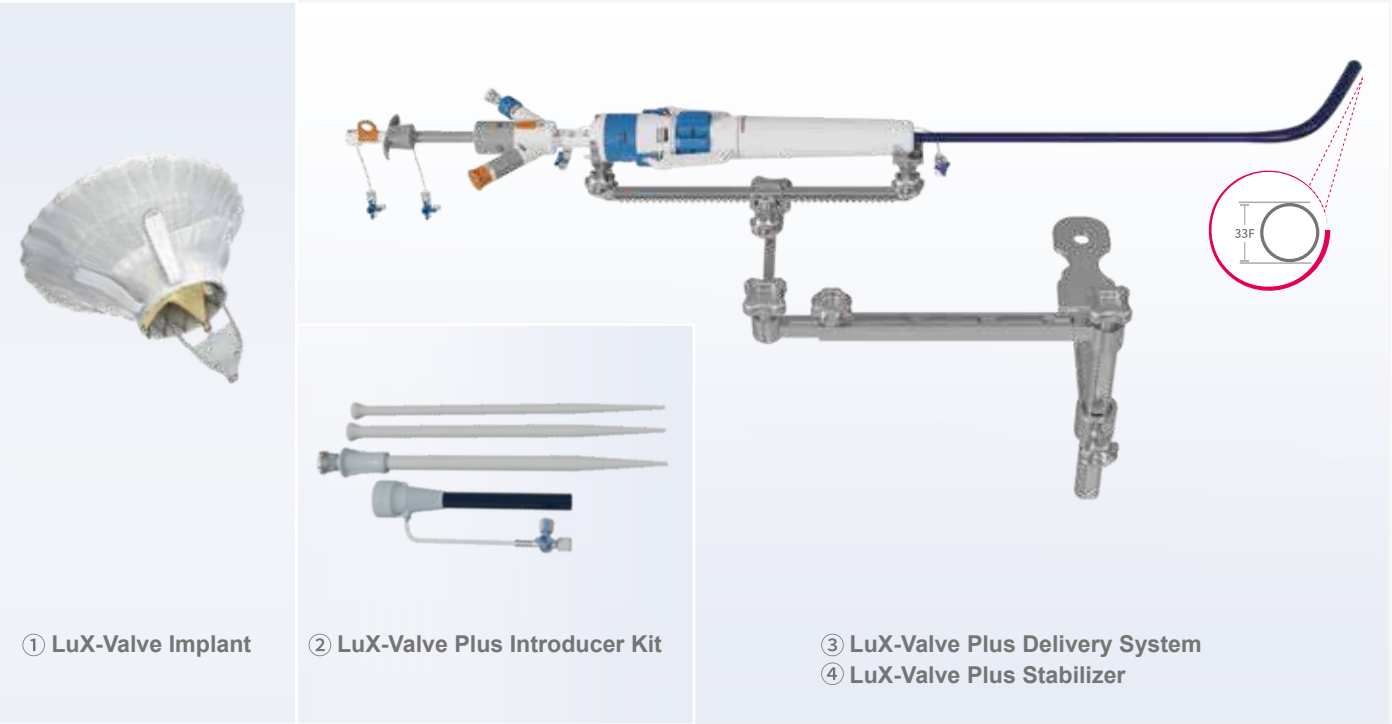

Nom du composant	Modèle / Référence catalogue
① LuX-Valve Implant :	JS/TTVI-28-40, JS/TTVI-28-45 JS/TTVI-28-50, JS/TTVI-28-55 JS/TTVI-30-40, JS/TTVI-30-45 JS/TTVI-30-50, JS/TTVI-30-55 JS/TTVI-30-60, JS/TTVI-30-65 JS/TTVI-30-70
② LuX-Valve Plus Introducer Kit :	JS/SID01-33-060, JS/SID01-33-100
③ LuX-Valve Plus Delivery System :	JS/TTVDJ-33
④ LuX-Valve Plus Stabilizer :	JS/STA-TJ01-01


LuX-Valve Plus™
Système de remplacement valvulaire tricuspide
par voie transveineuse spécialement
Conçu pour la valve tricuspide



Grâce à l’ancrage septal
de nouvelles perspectives

1. Données issues du rapport statistique de l’ essai clinique LuX-Valve Plus TRINITY et du rapport statistique des analyses en sous-groupes.
2. L’ étude TRINITY utilise la classification de la RT définie par Hahn et al. dans JACC: Cardiovascular Imaging, 2019.

Pour une implantation fiable

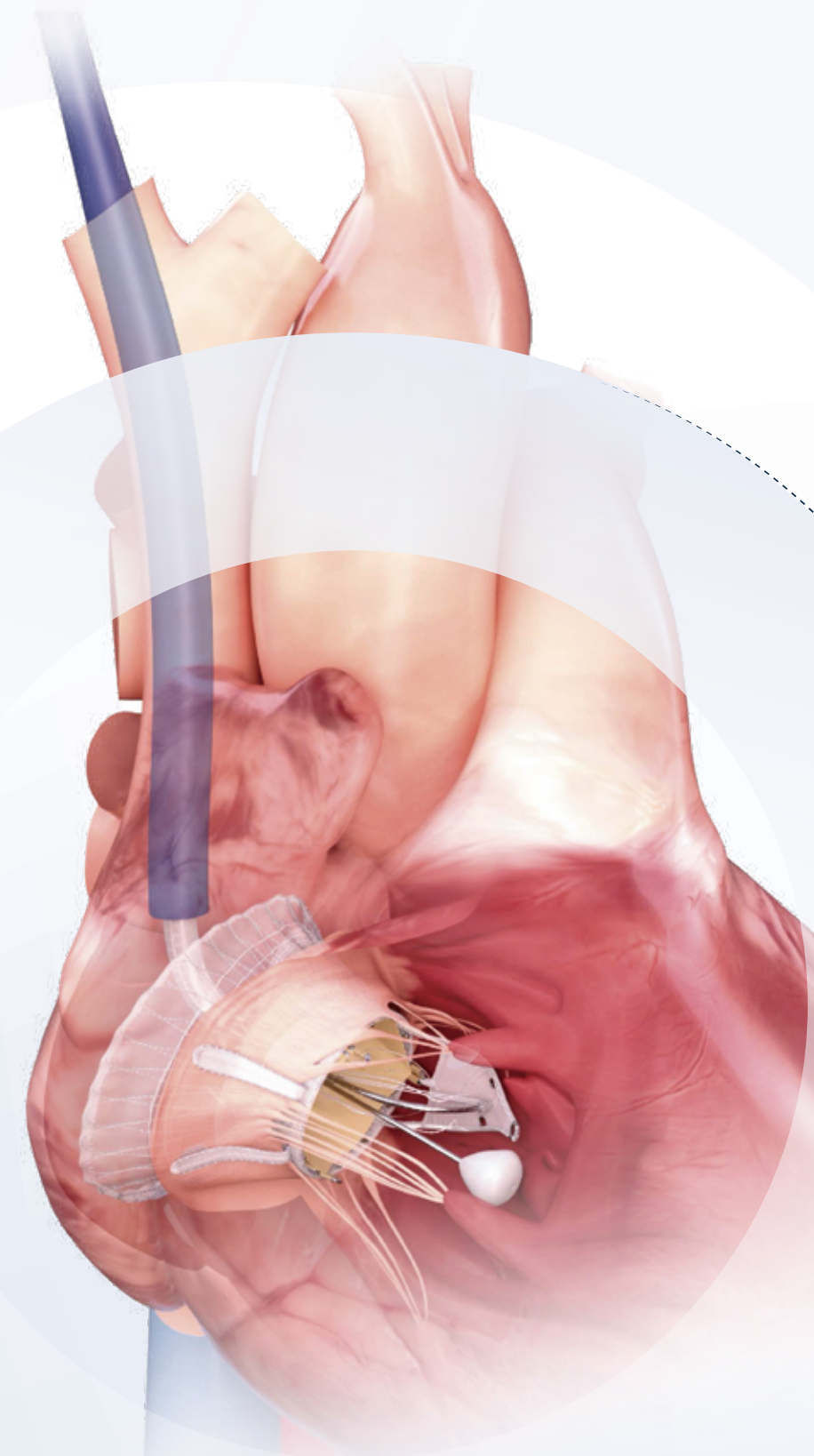

Accès

Accès transjugulaire

Ancrage

Ancrage septal indépendant de la force radiale

Adaptation

Jupe en tissu auto-adaptative pour réduire les fuites paravalvulaires

Anatomie

Gamme de tailles de 40 à 70 mm adaptée à diverses anatomies

► Jupe en tissu auto-adaptative

Compatible avec une intervention T-TEER antérieure ou avec des sondes de stimulateur/DAI préexistantes

Après une intervention T-TEER

En présence de sondes de stimulateur cardiaque ou de DAI

► En péricarde bovin

Conçue pour une durabilité prolongée

► Ancrage septal indépendant de la force radiale

Réduit le recours à l'implantation d'un stimulateur cardiaque permanent et favorise le remodelage du cœur droit

Système de mise en place orientable dans plusieurs plans

Permet un déploiement précis de la valve et un alignement coaxial optimal, tout en réduisant la durée de l'intervention

► Gamme de tailles de 40 à 70 mm adaptée à différentes anatomies

Un large choix de tailles répondant à la diversité des anatomies et des besoins cliniques